

TRATTAMENTI INDICATI

- VISO - COLLO - DECOLLETÈ -

- Detergere il viso con Klamère Essential (latte detergente)
- Applicare la quantità sufficiente di KlamaTon®
- Impostare il dispositivo e procedere con movimenti circolari dal basso verso l'alto
- Si consiglia di eseguire il trattamento per almeno una decina di minuti
- Rimuovere il prodotto residuo con acqua fresca
- Si consiglia sempre di concludere il trattamento con un leggero strato di **CREMA ULTRA**.

- CONTORNO OCCHI - LABBRA -

- Detergere la zona con Klamère Essential (latte detergente)
- Applicare la quantità sufficiente di KlamaTon® sul contorno labbra e contorno occhi.
- Impostare il dispositivo sulla potenza minima con un movimento lento a partire dall'interno del perioculare verso l'esterno, soffermandosi sulle "zampe di gallina". Per un risultato più efficace e visibile trattare almeno 3 minuti per ogni zona.
- Per il contorno labbra "codice a barra" eseguire movimenti circolari dall'esterno verso la parte centrale delle labbra, trattare almeno 5 minuti per un buon risultato.
- Eliminare il prodotto in eccesso con acqua fresca.
- Si consiglia sempre di concludere il trattamento con un leggero strato di **CREMA ULTRA**.

- CORPO -

pannicoli adiposi, cellulite, perdita di tono indicato nelle zone come **GLUTEI, ADDOME, COSCE, BRACCIA**

- Detergere la zona da trattare
- Applicare la quantità sufficiente di KlamaTon® e/o FluxiCell®
- Impostare il dispositivo e veicolare il prodotto 10 minuti per zona eseguendo movimenti circolari
- Massaggiare il prodotto residuo fino ad assorbimento e risciacquare la zona trattata con acqua fresca.

KlamaTon® e FluxiCell® contengono entrambe l'estratto brevettato AphaMax® e in alcuni casi possono essere miscelati come ad esempio nell' artrosi, dove c'è usura articolare e il FluxiCell® accresce l'effetto anti-infiammatorio e analgesico, mentre KlamaTon® aiuta a rigenerare la cartilagine grazie al contenuto di acido ialuronico.

COADIUVANTE PER TRATTAMENTI DI:

- Smagliature
- Cicatrici
- Lesioni muscolari
- Artrosi
- Articolazioni con stati infiammatori
- Articolazioni che presentano calcificazioni
- Vene varicose

NON UTILIZZARE IL TRANSDERMINO NEI CASI DI:

1. **Malattia cardiaca grave, pacemaker o bypass cardiaco.**
2. **Sulle parti del corpo ove presenti protesi metalliche.**
3. **In presenza di forme tumorali.**
4. **Febbre e malattie trasmissibili.**
5. **Spiccata sensibilità cutanea e scottatura solare.**
6. **Durante trattamenti medici.**
7. **Gravidanza e allattamento.**

ATTENZIONE:

Si prega di **NON UTILIZZARE** il dispositivo direttamente sulla palpebra mobile e di non guardare direttamente i **LED COLORATI**.

Da una più che ventennale ricerca scientifica **nasce la linea Klamère**, fondata sul potere vitale primordiale delle microalghe cianobatteriche. Dalla microalga selvatica del lago klamath (Oregon usa), otteniamo un estratto **brevettato AphaMax®**, dalle elevatissime proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie, tonificanti, rigeneranti e anti-aging, a cui associamo un esclusivo acido ialuronico ad alto peso molecolare, costituendo una sinergia unica in grado di agire rapidamente ed in profondità sugli inestetismi più comuni e su alcune problematiche a carico dell'organismo.

Grazie all'estratto AphaMax®, i cosmeceutici Klamère attivano rapidamente la capacità del nostro organismo di autorigenerarsi



NUTRIGEA®
la tua salute a 360°

NUTRIGEA SRL

Via Fondo AUSA, 78 - 47891 - Dogana (Rsm)
www.nutrigea.com - cosmeceuticals@nutrigea.com
Tel. 0549 94 20 19 - Fax. 0549 94 26 64

Klamère

COSMECEUTICALS



NUTRIGEA®
la tua salute a 360°



Klamère

LA NATURA PRIMORDIALE

PER IL TUO **BENESSERE** E LA TUA **BELLEZZA**

KlamaTon®

TONIFICA, MODELLA E RICOSTRUISCE



Aphamax®
Microalghe
Coenzima Q10
Hyaluron®
Inulina

Gel per trattamenti Viso e Corpo dalla forte azione rigenerante. Agisce efficacemente contro gli inestetismi causati dall'invecchiamento cutaneo, promuove la tonificazione dei tessuti contribuendo ad un aspetto più tonico e disteso della pelle. Grazie all'alto contenuto di acido ialuronico, Coenzima Q10 e inulina, esercita una forte azione liftante e anti-age.

NEI TRATTAMENTI VISO È INDICATO PER TRATTARE:

rughe, ridefinire l'ovale del viso, migliorare la compattezza dei tessuti del collo, del décolleté, dell'addome, dei glutei, dell'interno coscia e delle braccia.

INOLTRE È INDICATO PER: lesioni muscolari, smagliature, eczema, psoriasi, artrosi (cartilagine).

FluxiCell®

SFIAMMA, SCIOGLIE E DISSOLVE



Aphamax®
Microalghe
Centella Asiatica
Fosfatidilcolina
Caffeina
Lipaxil®
Protexil®

Gel Base a base di principi attivi altamente efficaci come la proteasi, la centella, la caffeina, la fosfatidilcolina che coinvolgono direttamente il processo lipolitico del tessuto adiposo, ed è indicato per il trattamento della cellulite e dell'adiposità localizzata.

La presenza dell'estratto AphaMax® fa sì che i nostri cosmetici compiano un'azione sia di nutrimento profondo del derma, sia un'azione rigenerativa, grazie all'attività antiossidante, rigenerativa e antiinfiammatoria.

L'azione principale del Fluxicell® è quella di Sfiamare, Sciogliere, Dissolvere.

DISPOSITIVO TRANSDERMICO

Caratteristiche:

Questo dispositivo è dotato di batteria sicura Li-ion.

L'indicatore LED è rosso durante il caricamento, ed è verde quando la carica è completa.

Alla fine di ogni trattamento pulire bene il dispositivo con un panno leggermente umido.



Dispositivo x IPC

Adattatore x IPC

Il dispositivo portatile ha due pulsanti che si utilizzano per l'accensione e l'impostazione del parametro che si vuole usare.

■ Pulsante in alto per accendere e selezionare gli **EMS** e **RF**

■ Pulsante in basso per impostare il **NURSE** e il **FOTONE** desiderato (scegliere il colore desiderato spingere più volte)

Il dispositivo transdermico grazie alle sue caratteristiche viene impiegato per favorire la veicolazione dei principi attivi nello strato profondo dei tessuti, per rendere più efficace il trattamento.

Specifiche:

Dispositivo di bellezza tramite elettroporazione e radiofrequenza

Alimentazione: AC 100-240V, 50/60 HZ

Dimensioni del prodotto: 17,5*4,5*4,0cm

Peso del prodotto: 105g

Potenza: 3W

ELETTROPORAZIONE CON RF + EMS:

L'elettroporazione permette ai principi attivi presenti nei gel di penetrare negli strati più profondi della pelle.


L'EMS (stimolazione muscolare con microcorrenti): stimola i tessuti e li rende più reattivi.

NURSE: micromassaggio abbinato all'elettroporazione stimola i tessuti ad una maggiore produzione di collagene ed elastina, per migliorare tono e compattezza della pelle.

FUNZIONI DEL FOTONE:

La luce fredda a Led per foto-biostimolazione sfrutta il principio degli impulsi luminosi (ovvero l'energia della luce), senza emissioni di calore, per stimolare e riattivare il metabolismo cellulare.

La luce Led viene assorbita dai tessuti sottocutanei per rivitalizzare la zona trattata.

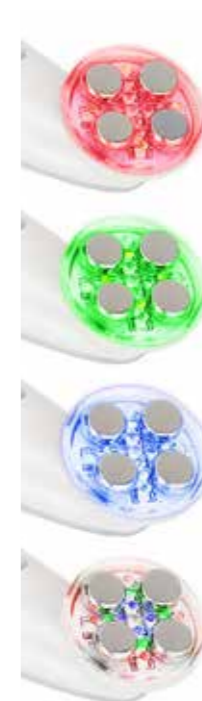

Led colore Rosso:

Azione anti-age, tonifica i tessuti, e stimola una maggiore produzione di collagene ed elastina.

Led colore Verde:

Azione schiarente su pelle iperpigmentata, contribuisce a schiarire le macchie cutanee ed ha una forte azione calmante.

Led colore Blu:

Adatta per pelli acneiche e con impurità, agisce come antibatterico con una buona azione antiinfiammatoria.

Led colore Azzurro:

Azione lenitiva, calmante negli stati infiammatori come ad esempio la couperose, la rosacea, contribuisce a schiarire il rossore.